



UROMONITOR

Instrucciones para la recogida, filtrado y envío de la muestra

1. Contenidos kit cosecha de orina UROMONITOR®

- 3 filtros
- Jeringa de 1 ml 10
- 1 bolsa de plástico hermética
- 1 pegatina con el logotipo UROMONITOR®
- cuadro 1 de cartón
- 1 expreso de DHL etiqueta
- 2 tapas para los filtros

Muestra de cultivos y producción

1 COSECHA

1.1 Recoger la orina en un frasco de colección.

(No incluido en el kit de UROMONITOR®)

Proceder inmediatamente para filtrar o almacenar el vial de muestra a 4 ° C hasta el momento de la filtración (para un máximo de 4 horas) con el fin de preservar la calidad de la muestra y evitar la contaminación.



2. FILTRACIÓN

2.1. Tome en una muestra de 10 ml de la botella de recogida de orina utilizando una jeringa (Figura 2.1).

2.2. Enrosque un filtro en el extremo de la jeringa (Figura 2.2)

2.3. Tire del émbolo de la jeringa con el fin de pasar todo el volumen de orina a través del filtro en un recipiente de eliminación (Figura 2.3).

2.4. Desatornillar el filtro y repita los pasos 2.1 a 2.3 para drenar la orina o los filtros suministrados.

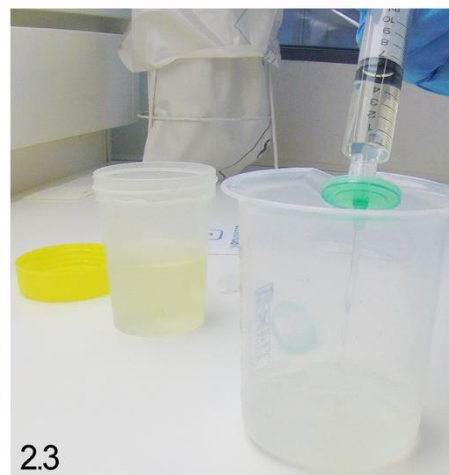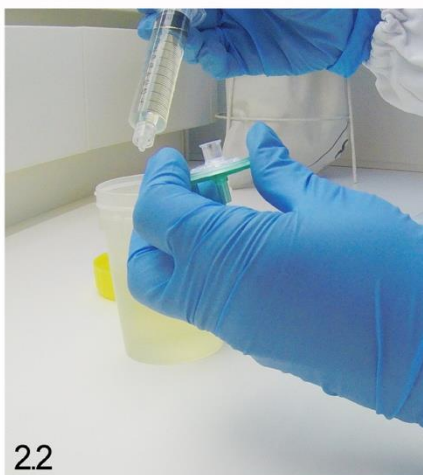


IMPORTANTE: Independientemente del volumen de filtrado de orina recogida siempre se deben realizar a través de al menos dos filtros.

Si el filtro colapsa y detiene el flujo de orina, cambiar el filtro por uno de los otros que tienen disponibles y proceder con la proyección de la muestra.

3. ENVÍO

3.1. Montar el filtro entre sí y la cinta de los extremos libres con los tapones suministrados; poner los filtros en la misma bolsa de plástico que viene con el UROMONITOR® orina filtrado kit (Figura 3.1) y procederá a emitir el mismo como se explica en la sección "Instrucciones de envío".

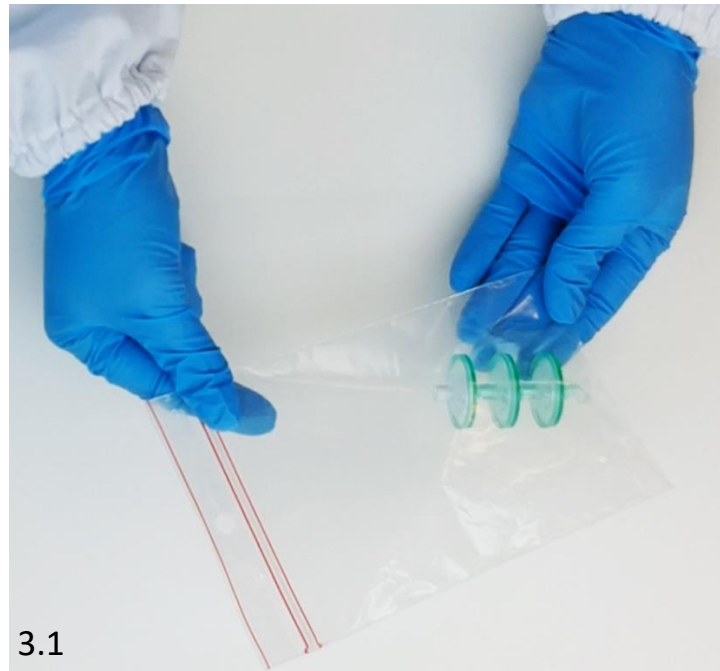

Instrucciones de envío

1. Coloque la bolsa de plástico que contiene los filtros en la caja de cartón;
2. Sellar la caja con la etiqueta engomada con el logotipo UROMONITOR®;
3. Pegar la etiqueta DHL expresa firmemente sobre la superficie de la envoltura del envío de DHL. Asegúrese de que la etiqueta es claramente visible en las superficies envolventes y con envío que no cubre cualquiera de los bordes.
4. En contacto con su local de DHL para organizar la recogida de la muestra. Un correo electrónico de confirmación será enviado a usted tan pronto como el UROMONITOR el laboratorio recibir la muestra de DHL.

¿Preguntas? Ayudamos

Preguntas frecuentes: www.uromonitor.com

Pedidos y envíos: info@uromonitor.com

recogida y el tratamiento de la muestra: lab@uromonitor.com

